


СУШАРКА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ ПРОБІРОК



Сушарка призначена для сушіння скляного лабораторного посуду шляхом підігріву поверхні і повітря, яке продувається крізь видувні трубки. Сушарка може використовуватися в сільськогосподарських підприємствах, загальних та/або виробничих лабораторіях і т.д.

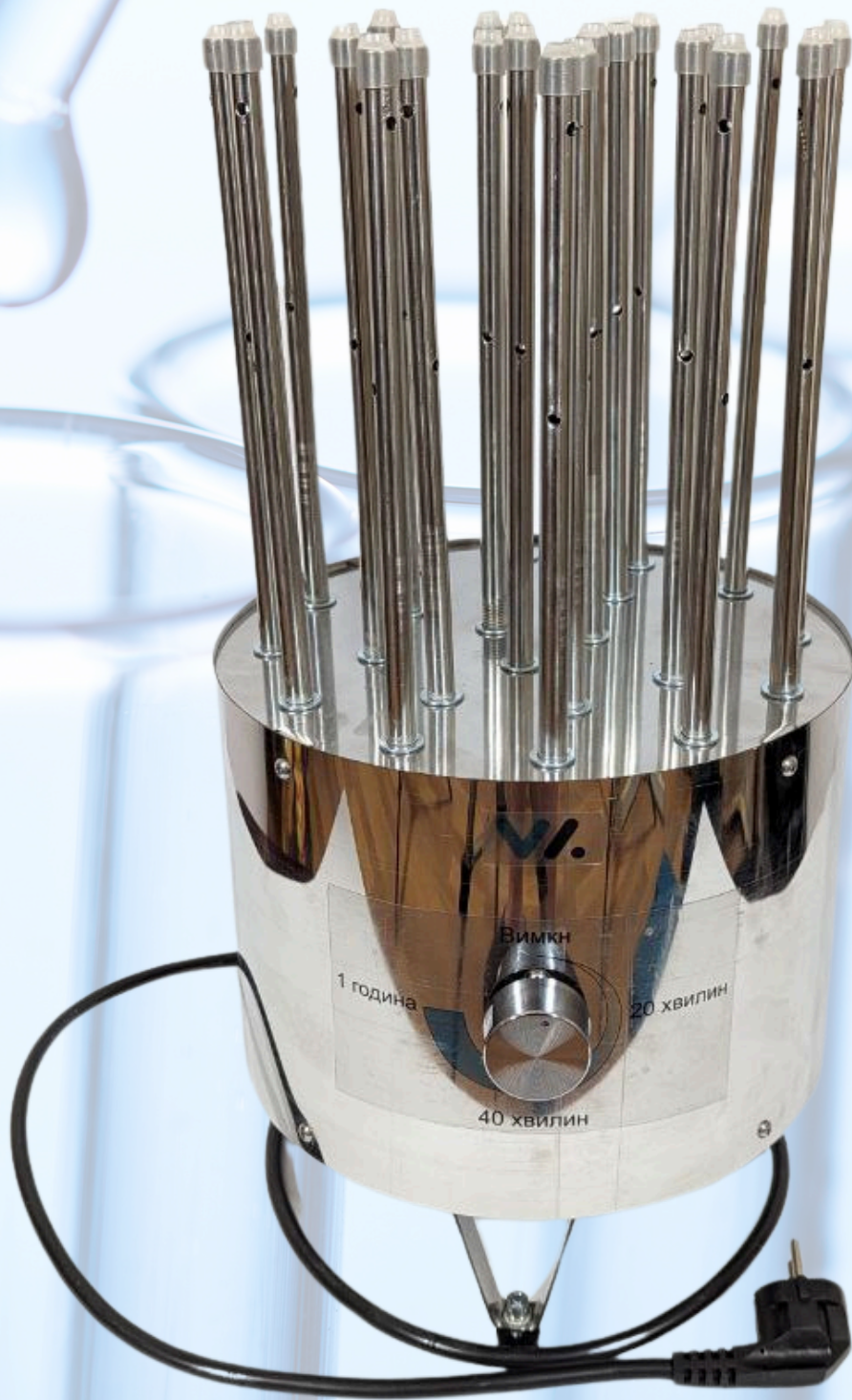

ПЕРЕВАГИ:

- Посадкових місць – 15–23 шт.;
- Приблизний час сушки посуду (23 віскозиметричні пробірки) +/- 15 хв.;
- Час безперервної роботи 1 год. (з перевами по 5–10 хвилин на зйом пробірок і таймер може працювати 8+ години);
- Робочий температурний діапазон: 0°C ... +80°C.;
- Діапазон вологості середовища: 10% ... 70%.;
- Клас захисту – IP2X.

